

FarmaSafe@

Sistema Integrato Gestione Farmaco Terapia



Manuale Ricomposizione Vassoio

INDICE

1	RICOMPOSIZIONE VASSOIO	4
1.1	COME RICERCARE UN PAZIENTE CON TERAPIE DA RICOMPORRE	4
1.2	COME CONFERMARE IL CONTROLLO DEL VASSOIO.....	5

1 RICOMPOSIZIONE VASSOIO

Scopo della funzionalità è di controllare i farmaci da somministrare al paziente, segnalando la presenza di farmaci appartenenti ad altri pazienti o a giorni diversi di somministrazione, o contenitori aventi etichette non allineate all'ultimo salvataggio, o l'assenza di preparazioni o farmaci. E' applicabile solo alle terapie protocollate e contempla tutti i farmaci confermati dal medico per il giorno di ciclo, qualsiasi sia il luogo di preparazione ("Umaca", "Reparto", "Pronto"). L'operazione deve essere eseguita possibilmente una sola volta, quando tutti i farmaci sono ormai stati allestiti.

Per verificare che i farmaci presenti nel vassoio corrispondano ai farmaci effettivamente prescritti ad un paziente, selezionare dal menù "**Aree Funzionali**" il reparto (Degenza/Day Hospital) relativo al paziente interessato, e dal menù "**Piani lavoro di reparto**" la voce "**Ricomposizione vassoio**":



1.1 Come ricercare un paziente con terapie da ricomporre

Alla selezione della voce "**Ricomposizione vassoio**", il sistema apre una maschera per la ricerca dei pazienti con terapie da ricomporre. Nella parte in alto compaiono i campi per filtrare i pazienti: "**Cognome**" (sufficiente la parte iniziale), "**Centro di Costo**" (descrizione del reparto prescrivente), "**Codice Contenitore**" (codice a barre riportato su una qualsiasi delle etichette):

RICERCA RICOMPOSIZIONE VASSOIO

Cognome Centro di Costo Codice Contenitore

> Ricerca > Azzera

La **modalità operativa consigliata** è quella di filtrare per “**Codice Contenitore**”, ovvero posizionarsi sopra con il cursore del mouse e leggere tramite lettore di *barcode* il codice a barre riportato su una delle etichette dei preparati del paziente, **senza** premere il pulsante “Ricerca”. Se il contenitore appena letto appartiene ad una delle terapie in procinto di somministrazione, il sistema visualizzerà il nome del paziente con i dati di riferimento del protocollo e del giorno di ciclo da somministrare. Se invece si utilizzano gli altri filtri, dopo aver premuto il pulsante “**Ricerca**” il sistema visualizzerà i risultati nella parte sottostante del video restituendo una sola riga per paziente e giorno del ciclo:

RICERCA RICOMPOSIZIONE VASSOIO

Cognome Centro di Costo Codice Contenitore

> Ricerca > Azzera

LISTA RICOMPOSIZIONE VASSOIO

Paziente	Data di nascita	Num. Pratica	Reparto	Protocollo	N.Giorno	Data Somm
1 COLOMBO ARMANDO	27/06/1937	108011225	Oncologia Medica- Degenza	FOLFIRI CON CVC (G)	2	23/10/2008

1.2 Come confermare il controllo del vassoio

Cliccando sopra la voce del paziente desiderato, il sistema aprirà una pagina contenente la lista dei contenitori e dei farmaci con stato “**Da ricomporre**” afferenti al giorno di ciclo scelto:

Cognome: Nome: Sesso: Eta: Nota:

♦Episodio clinico: Letto: 16 Numero Ricovero: 108011225 Data ingresso: 13/04/2008 - 09:53 Stato: Aperto


Codice Contenitore > Invia

23/10/2008

Preparato	Sequenza	Via Somm.	N ° Conten.	Tipo	In Vassoio
<input type="checkbox"/> ACIDO LEVO FOLINICO (PREP UMACA)	4	Via Somm.: ev- infusione	1/1	SACCA 300574	
<input type="checkbox"/> FLUOROURACILE (5-FU) (PREP UMACA)	5	Via Somm.: ev-bolo	1/1	P 44 H 414419	

La conferma della ricomposizione avverrà contenitore per contenitore, leggendo uno alla volta il codice a barre delle etichette. Quando l'operatore (munito di lettore di *barcode*) leggerà il codice a barre di una delle etichette, il sistema visualizzerà un' **icona rossa** nella colonna "In Vassoio" in corrispondenza del contenitore letto:

Preparato	Sequenza	Via Somm.	N° Conten.	Tipo	In Vassoio
<input type="checkbox"/> ACIDO LEVO FOLINICO (PREP UMACA)	4	Via Somm.: ev- infusione	1/1	SACCA 300574	

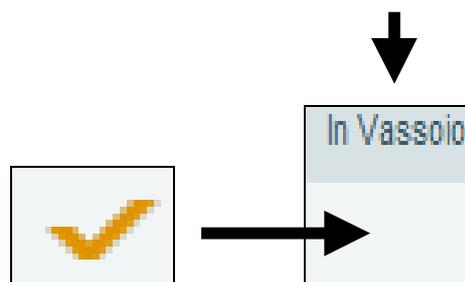

Se il preparato ha un solo contenitore, il sistema spunterà dalla *check-list* il preparato; altrimenti, attenderà a fare la spunta solo dopo la lettura di tutti i contenitori previsti per il preparato:



Se il codice di contenitore letto non appartiene ai contenitori della *check-list*, il sistema lo segnalerà con un apposito messaggio:

Codice Contenitore > Invia

 **ATTENZIONE!**

CONTENITORE 1 NON TROVATO

Una volta che tutti i componenti da somministrare sono stati spuntati, premere il pulsante “**Conferma**”; il paziente scomparirà dalla lista della ricerca della Ricomposizione vassoio e tutti i preparati/farmaci confermati passeranno allo stato “**Da somministrare**”, pronti per la somministrazione al paziente - operazione effettuabile tramite la funzione “**Somministrazione**” nei “**Piani lavoro di reparto**”:



Per tornare alla pagina di ricerca e controllare un altro vassoio, invece, premere il pulsante “**Indietro**”:

